



LA LETTRE #34

70^{ième} Anniversaire du groupe Menicon ●●●●●●●●●● JUILLET 2021

MENICON CÉLÈBRE 70 ANS DE DÉFIS ET D'INNOVATIONS



depuis la création par Kyoichi Tanaka de la 1^{ère} lentille cornéenne au Japon, en 1951... En poursuivant toujours la même exigence

dans la recherche de la plus grande sécurité oculaire, afin de créer des produits à la fois confortables et pratiques pour partager dans le monde entier la joie de bien voir.

En tant qu'entreprise globale dédiée à la santé visuelle, Menicon est le premier fabricant à offrir une gamme complète de produits et de services, comprenant des lentilles rigides perméables à l'oxygène, des lentilles de contact jetables et des solutions d'entretien, mais également un plan de traitement du contrôle de la myopie, Menicon Bloom, pour répondre aux enjeux actuels. Menicon Bloom Night et Bloom Day seront bientôt progressivement introduits en France.

Menicon s'engage dans une démarche permanente de qualité pour créer les prochaines générations de lentilles de contact, de produits d'entretien et de services grâce à une technologie de pointe, avec en particulier le concept unique Smart Touch™, innovation qui permet de poser des lentilles de contact sans toucher la surface interne. La gamme Miru 1day UpSide multifocal s'agrandit encore avec le lancement du design HIGH pour les presbyties plus avancées.

A découvrir à la rentrée : la version multifocale des lentilles Miru 1day Flat Pack. Menicon propose ainsi le choix le plus complet de lentilles multifocales de 1 jour à 1 an avec des accompagnements spécifiques pour commencer à adapter simplement et avec succès tous types de porteurs en lentilles Menicon, qu'elles soient souples, rigides perméables ou même hybrides.

Menicon s'investit aussi dans le développement durable, pour un plus grand respect de l'environnement dans ses sites de fabrication et dans la conception des produits. Le packaging Miru 1day Flat pack en est un exemple.

Nous sommes fiers de célébrer avec vous et grâce à vous ce long partenariat d'histoire et de partager nos innovations tout au long des actualités et rendez-vous de cette année 2021.

Anne Falcotet
Directeur marketing
& Corporate Planning

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN FRANCE



Le groupe Menicon vient de nommer le nouveau Directeur général de la filiale française, Franck Leclere qui a pris ses fonctions lundi 21 juin.

Ancien PDG de De Rigo France, Franck Leclere avait déjà occupé des postes de direction dans la lunetterie, notamment chez Alain Mikli International.

Le nouveau directeur général de Menicon SAS sera en lien avec tous les départements de l'entreprise, avec un focus particulier sur les opérations commerciales au travers des réseaux de ventes et de visites médicales.

« Je suis ravi d'intégrer le groupe Menicon et de participer à son développement avec des enjeux importants dans le domaine des lentilles de contact. Partageant les valeurs de l'entreprise que sont la créativité, l'originalité et le challenge, je m'appuierai sur une équipe solide et solidaire pour construire de nouveaux projets en partenariat avec les professionnels de la vision », réagit Franck Leclere.

Franck Leclere
Directeur général



DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ L'UNIVERS DES LENTILLES SOUPLES MENICON

Pages 2-3-4-5



DOSSIER ECO : L'ENGAGEMENT ECO DE MENICON

Page 6



SPORT ET LENTILLES

Page 7

QUESTIONS RÉPONSES AU SUJET DES SOLUTIONS D'ENTRETIEN DES LENTILLES

Page 8



DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ L'UNIVERS DES LENTILLES MULTIFOCALES SOUPLES MENICON



Toujours une solution Menicon pour tous les profils de presbytes

Environ 32% de la population française est concernée par la presbytie : la génération X (entre 40 et 55 ans) qui compte plus de 13,9 M de personnes soit 21% de la population, et les baby-boomers (entre 56 et 75 ans), qui comptent plus de 7 M de personnes soit 11% de la po-

pulation. Sécurité, Qualité & Innovation, Menicon propose des solutions pour tous les profils de presbytes pour leur apporter une vision nette et confortable dans la vie, quelle que soit leur exigence visuelle et leur style de vie.



MIRU 1DAY UPSIDE MULTIFOCAL : NOUVELLE ADDITION HIGH


Miru

1day UpSide



+5.00 D à -6.00 D (0.25 D)
-6.50 D à -10.00 D (0.50 D)
ADD : LOW et HIGH (**NOUVEAU - JUIN 2021**)
Conditionnement :
30L 3x30L

LA LENTILLE JETABLE JOURNALIÈRE MULTIFOCALE EN SILICONE HYDROGEL AVEC LA TECHNOLOGIE SMART TOUCH™

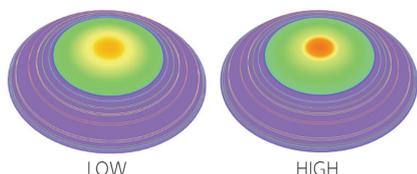

Géométrie Neuro Adaptative™
Vision de près centrale
Confort visuel grâce aux transitions en douceur des zones de vision de près, intermédiaire et de loin.

Conseils d'adaptation en Miru 1day UpSide multifocal

Miru 1day UpSide multifocal a été spécifiquement conçue pour faciliter l'adaptation en lentilles multifocales.

- Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en vision de loin
- Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de $\pm 4,00D$ et l'équivalent sphérique pour un astigmatisme jusqu'à 1D
- Déterminer l'oeil dominant
- Déterminer l'addition. Une puissance au loin plus convexe en 1ère intention est souvent bien acceptée.

L'adaptation des lentilles de contact n'a jamais été aussi simple avec notre Calculateur en ligne :



<http://multifocal.meniconcalculator.com/calculateur-lentilles-souples-multifocales>

Sélection initiale de la lentille	Optimisation Vision de loin	Optimisation Vision de près
Add +0,75D à +1,25D Les 2 yeux	Ajuster la puissance en vision de loin Oeil dominant	Rajouter du convexe Oeil non dominant
Add +1,50D à +1,75D Les 2 yeux	Ajuster la puissance en vision de loin Oeil dominant	Passer en HIGH Les 2 yeux *
Add +2,00D et au-delà Les 2 yeux	Ajuster la puissance en vision de loin Oeil dominant	Rajouter du convexe Oeil non dominant

Conseils : Toujours proposer le maximum convexe conduisant à l'addition la plus faible. Pour d'autres optimisations essayer autant de lentilles que nécessaire pour tester le maximum convexe.

* Retirer le +0,50 initialement proposé



TÉMOIGNAGE PAR LE DOCTEUR MARIE-CAROLINE TRONE (CHU DE SAINT-ETIENNE)



PAROLE D'EXPERTS : RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA LENTILLE MIRU 1DAY UPSIDE MULTIFOCAL




Retrouvez les cas cliniques sur le site de la SFO :
<https://sfo.e-congres.com/fr/visit/video/menicon>
et bientôt sur notre campusmenicon dans la rubrique « Actualités ».



ZOOM sur la technologie **SMÂRT TOUCH™** : Toutes les lentilles journalières de Menicon sont dotées de la technologie **SMÂRT TOUCH™**, qui oriente la lentille toujours dans le bon sens et évite de toucher la face interne de la lentille pour réduire la contamination microbienne lors de manipulation.

92%
des porteurs de lentilles
multifocales admettent avoir déjà
porté leurs lentilles à l'envers¹

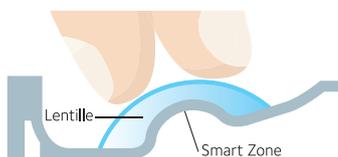

SMÂRT TOUCH™



Blister traditionnel

- Très apprécié notamment des primo-porteurs+++
- Intéressant dans le contexte sanitaire

¹ Source : Données Menicon

TRUCS ET ASTUCES LORS DE L'ADAPTATION

- **Importance de l'explication du COMPROMIS VISUEL au patient**
Une indépendance par rapport aux lunettes dans 80-90% des activités.
- **La Réfraction : Une clé de la réussite de l'adaptation**
 - Réfraction maximale convexe du jour
 - Déterminer l'œil préférentiel de loin
 - Déterminer l'addition minimale
- **Lors de la 1^{ère} pose : laisser quelques minutes au patient avant de vérifier l'acuité visuelle**
Marcher dans les couloirs, monter des escaliers, utiliser son smartphone...
- **Avant de réaliser une ou des optimisations : Laisser une période d'adaptation de quelques semaines au patient.**
- **Accompagner le porteur avec des conseils**

RETROUVER NOS CONSEILS PORTEURS SUR WWW.PASSEPORTLENTILLES.FR



www.passeportlentilles.fr

Consulter des brochures et des vidéos de manipulation et d'entretien de lentilles pour tous les porteurs de lentilles souples, lentilles rigides, lentilles scléales et lentilles nocturnes de Menicon en libre accès.



**DÉCOUVREZ MIRU 1DAY FLAT PACK MULTIFOCAL
DISPONIBLE DÈS SEPTEMBRE 2021**

Miru
1day Menicon Flat Pack



NOUVEAU

multifocales

+4.00 D à -6.00 D (par 0.25 D)
-6.50 D à -10.00 D (par 0.50 D)
Addition : LOW

**DÉCOUVREZ
NOS NOUVEAUTÉS
EN VIDÉO**



<https://vimeo.com/561379030>



sphériques

Confort

- Hydratation renforcée par matériau biométrique
- Surface douce avec une même épaisseur au bord quelque soit la puissance.




toriques

Santé

- 3 fois moins de contamination après retrait du blister¹
- Packaging unique empêchant toute réutilisation possible

1. Évaluation de la diminution de la contamination microbienne lors de la manipulation d'une nouvelle lentille de contact jetable journalière Flat Pack, M Nomachi et al, Eye & Contact Lens, Vol 39, N° 3, Mai 2013.

Géométrie et conseils d'adaptation en Miru 1day Flat Pack multifocal

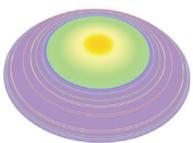

Géométrie Neuro Adaptative™ Vision de près centrale

Confort visuel grâce au transitions douces de puissances entre les zones de vision de près, intermédiaire et loin. La géométrie très fine bi-asphérique améliore le confort et la qualité visuels, offrant une profondeur de champ étendue et un contrôle sophistiqué des aberrations.

Miru 1day Flat Pack multifocal a été spécialement conçue pour faciliter l'adaptation des lentilles multifocales.

- Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en vision de loin
- Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de $\pm 4.00D$ et l'équivalent sphérique pour un astigmatisme jusqu'à 1.00D
- Déterminer l'œil dominant
- Déterminer l'addition. Les ajustements de puissance ne sont généralement pas nécessaires, une puissance au loin plus convexe en première intention est souvent bien acceptée.

Sélection initiale de la lentille	Optimisation Vision de loin	Optimisation Vision de près
Add +0.75D à +1.25D LOW Les 2 yeux	Ajuster la puissance en vision de loin LOW Oeil dominant	Rajouter du convexe LOW Oeil non-dominant
Add +1.50D et au-delà LOW Les 2 yeux	Ajuster la puissance en vision de loin LOW Oeil dominant	Rajouter du convexe LOW Oeil non-dominant

Conseils : Toujours proposer le maximum convexe conduisant à l'addition la plus faible. Pour d'autres optimisations essayer autant de lentilles que nécessaire pour tester le maximum convexe.



L'adaptation des lentilles de contact n'a jamais été aussi simple avec notre Calculateur en ligne :

<http://multifocal.meniconcalculator.com/fr/calculateur-lentilles-souples-multifocales>



QUELLE EST LA PLACE DE LA MIRU 1MONTH MULTIFOCAL LOW ET HIGH ?



**INTERVIEW DE MICHAEL GUEZ,
DIRECTEUR FORMATION.**



La lentille Miru 1month multifocal en vidéo
<https://vimeo.com/545893586>



La version HIGH de la Miru 1day UpSide est-elle la même que celle de la Miru 1month multifocal ?

leur épingle du jeu. L'originalité du design HIGH réside également dans sa pastille VP décentrée en nasal pour répondre aux spécificités pupillaires et de comportement de lentilles en VP avec respectivement un décentrement pupillaire en nasal et un décentrement partiel de la lentille en temporal. Ainsi le vis-à-vis pupille/VP sera mieux respecté.

La Miru 1 Day Upside multifocal, journalière en silicone-hydrogel bénéficiant du concept Smart Touch™ pour une manipulation hygiénique et rapide existait jusqu'à présent en version LOW, une version HIGH vient dorénavant compléter sa gamme. Des différences notables sont néanmoins à signaler par rapport à la version mensuelle :

- Cette lentille journalière bénéficie du matériau exclusif de la Miru 1Day Upside, le midafilcon, de ses très faibles modulus et coefficient de friction qui lui confèrent des transitions de puissances particulièrement douces expliquant la qualité de vision.
- Autre différence, le profil HIGH est progressif

à VP centrale.

La complémentarité entre faibles et fortes additions passent par des gradients de puissances plus doux et les plus progressifs possibles dans les additions requises.

Un avantage à rester sur des principes optiques identiques entre les versions LOW et HIGH, ici progressifs, est d'optimiser l'adaptation avec plus de prédictions de succès que le suggérerait un passage d'une version LOW progressive à HIGH bifocale décentrée très différentes géométriquement.

A noter un aspect remarquable des versions LOW en lentilles journalières comme mensuelles : elles donnent de très bons résultats visuels même dans des additions modérées à plus avancées à condition d'être le maximum convexe en VL. Il ne faut pas hésiter à les privilégier jusqu'à des additions de 2D (cf. guide d'adaptation).

NON : La lentille Miru 1month multifocal repose sur le concept exclusif « Dual balanced design ». Ce concept vise à fournir une VP efficace tout en préservant une bonne qualité de VL. Il repose sur la complémentarité de ses 2 designs : le design LOW progressif à VP centrale pour des presbyties débutantes à modérées et le design HIGH proche d'une bifocale à VP centrale décentrée pour des presbyties plus avancées.

Cette recommandation se base sur les contrastes issus de systèmes progressifs donnant de meilleurs résultats dans des additions faibles à modérées que des systèmes bifocaux. Et l'inverse dans des additions plus fortes où les systèmes bifocaux tirent mieux

MODALITÉS DE PORT ET FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT DES LENTILLES SOUPLES EN 2021



TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR KATHERINE VIS (ST LAURENT DU VAR)



Plus de la moitié des lentilles souples vendues en Europe sont des lentilles jetables journalières. Quels conseils donner selon le type de port et la fréquence de renouvellement et quelle place donner au lentilles à renouvellement bi-mensuel ?

En port Diurne,

- Pour les Lentilles Jetables journalières : il faut insister sur le principe 1 lentille = 1 jour et PAS un jour et une nuit.
- En renouvellement fréquent (15, 30 ou 90 jours) : le port de lentilles est à coupler avec un entretien bien conduit.
- En renouvellement traditionnel (annuel) : il faut insister sur l'entretien (déprotéinisation++) et le respect du renouvellement. La surveillance des complications dues à l'hypoxie doit être stricte.

En port nocturne,

- On s'orientera sur les lentilles en silicone hydrogel à très haute transmissibilité à l'oxygène*, ayant l'agrément CE pour le port prolongé. On privilégiera le renouvellement 2 semaines qui permet une flexibilité de port (en particulier pour les adolescents).

Quelque soit le port continu, il ne peut se faire qu'avec une surveillance stricte du fait du risque d'hypoxie.

Il faut revoir le patient après la 1^{ère} nuit de port et en fin de la période d'essai avant la prescription. A noter que le port continu est à réserver à des professions bien spécifiques et sous surveillance stricte (informer de le suspendre lors d'épisodes infectieux ORL).

En Port occasionnel,

- Lors d'occasions ou de pratiques sportives : Privilégier les lentilles à usage unique du fait de l'absence d'entretien.

L'interrogatoire pour déterminer la motivation du porteur sera essentiel.

- Quel est le motif d'adaptation : esthétique, pratique, pour le sport ?
- Quelles modalités de port sont envisagées :

occasionnel (jetables journalières), régulier (lentilles mensuelles ou bi-mensuelles) ?

- Quelle est la propension à respecter les règles d'hygiène (variable selon le mode de vie : horaires irréguliers...)?
- Quel est le passé contactologique : échec antérieur ? Pourquoi ?

Autant de questions qui guideront le choix de l'adaptateur.

* À noter que si l'on veut équiper des patients nécessitant des forts Dk/e (par exemple pour du port prolongé, nocturne ou à but thérapeutique), seules les lentilles à renouvellement 15 ou 30 jours, qui ont les Dk/e les plus élevés (> 125 Unités Fatt), peuvent le permettre. (Source : rapport SFOALC ...)



Ex : les lentilles Menicon PremiO en silicone hydrogel renouvelées toutes les deux semaines Dk / e : 161 x 10-9 (ISO) 2 rayons (8.30mm et 8.60mm)



L'ENGAGEMENT **ECO** DE MENICON



Dans Menicon, il y a « **eco** »



Financement de 2 000 arbres plantés par Menicon SAS.

Campagne de reforestation menée par Menicon SAS en 2019 en partenariat avec Reforest'Action pour planter un arbre pour trois boîtes de lentilles de contact achetées par les consommateurs. 2 000 arbres ont été plantés en France, en Tanzanie, au Brésil et à La Réunion pour conserver les ressources naturelles.

Une campagne similaire a démarré cette année 2021.



Le secret derrière notre logo Menicon

Menicon a développé avec passion des matériaux pour des lentilles de contact sûres qui fournissent une excellente perméabilité à l'oxygène à la cornée. Dans nos régions boisées, les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l'air et utilisent la lumière du soleil et la chlorophylle pour produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Le rouge symbolise la lumière du soleil et le vert rappelle nos forêts.




ENGAGEMENT MENICON DANS LA CONCEPTION DE NOS PRODUITS



Dans Menicon, il y a « **eco** »

Miru

1day Menicon Flat Pack

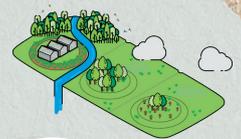

D'un millimètre seulement d'épaisseur, le conditionnement primaire recyclable des lentilles permet de diminuer de 80% la quantité de plastique.



Le volume de déchets générés sur une année (730 lentilles) ne représentent que 20% par rapport à des blisters classiques de lentilles.



La boîte recyclable de Flat Pack est conçue à partir des moules de fabrication recyclés.

SOLUTIONS D'ENTRETIEN : FLACONS
Mise en place d'un nouveau procédé de fabrication permettant jusqu'à **30% de réduction** de la quantité de matière plastique utilisée.



SPORT ET LENTILLES



En France, 45 % des femmes et 50 % des hommes de 16 ans ou plus déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive dans l'année, et parmi eux 33.1% des femmes et 35.0% des hommes de 65 ans et plus, selon l'INSEE¹. Cependant, 70% des français ignorent l'existence des équipements visuels adaptés aux activités sportives.² 80% des informations traitées par le cerveau pendant l'activité sportive sont d'origine visuelle. Une vision de bonne qualité est importante pour la performance sportive et la sécurité liée aux sports. Pour ceux ayant des amétropies, les lentilles de contact offrent la possibilité de pratiquer le sport dans les meilleures conditions.

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DES LENTILLES DE CONTACT

Les lentilles de contact permettent d'avoir un champ visuel intégral sans déformation périphérique des verres en préservant l'effet de perception de la profondeur de champ et une acuité visuelle quel que soit le mouvement des yeux. Elles évitent la buée, le glissement des lunettes classiques et elles permettent de porter des appareils de protection en pratiquant certains sports, tels que les lunettes de soleil, les casques ou les masques.

LES CHOIX MENICON POUR LES SPORTIFS Z Night - les lentilles d'orthokératologie

Les lentilles Menicon Z Night remodelent la cornée pendant le sommeil et permettent de corriger la myopie et/ou l'astigmatisme dans la journée sans lentilles ni lunettes. La vision est alors libérée sans contrainte. Elles sont particulièrement recommandées pour les sports aquatiques et les sports en milieu poussiéreux, où le risque de contamination est élevé, ainsi que les sports de combat où les participants risquent de casser ou de perdre leurs lentilles ou lunettes. De plus, le matériau Z assure une sécurité de port optimale.

Les lentilles jetables journalières

Elles restent la meilleure solution pour corriger l'amétropie des sportifs. Elles sont faciles à porter et ne nécessitent pas d'entretien. Les lentilles jetables journalières Miru 1day Menicon Flat Pack sont particulièrement adaptées aux besoins des sportifs. Elles sont confortables et offrent une vision nette avec le contrôle d'aberrations sphériques longitudinales. Leur packaging doté de la technologie Smart Touch™ réduit le risque de contamination car le porteur ne touche pas la face interne de la lentille ; de plus le packaging d'1mm épaisseur est facile à transporter.

En revanche, il est contre-indiqué de porter des lentilles de contact dans le milieu aquatique où le risque d'infection d'*Acanthamoeba keratitis* existe. Durant les sports de combat, le risque de casser ou de perdre ses lentilles est plus élevé pour les porteurs de lentilles rigides perméables.

Les autres types de lentilles

Les lentilles rigides perméables en matériau Z de Menicon sont particulièrement recommandées pour les sports d'altitude grâce à leur ultra perméabilité à l'oxygène. Les lentilles mensuelles ou bimensuelles en silicone hydrogel telles que Miru 1 month et Menicon PremiO sont un choix classique pour un port quotidien régulier. Les lentilles Menicon PremiO sont aussi adaptées au port prolongé en cas de raids par exemple.



LE SAVIEZ-VOUS :

Par groupe d'âge, les pourcentages des français qui déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive dans l'année sont : 50% des femmes et 63.1% des hommes entre 16 et 24 ans, 49.1% des femmes et 58.2% des hommes entre 25-39 ans, 47.3% des femmes et 50.4% des hommes entre 40 à 49 ans, 50% des femmes et 45.9% des hommes entre 50-64 ans, et 33.1 des femmes et 35.0% des hommes de 65 ans et plus.

1. « Pratiques physiques sportives des femmes et des hommes », INSEE Première n° 1675, novembre 2017.

2. Étude réalisée en ligne du 3 au 10 mars 2020 puis du 9 au 11 février 2021, auprès de 1 000 Français représentatifs de la population.



QUESTIONS RÉPONSES AU SUJET DES SOLUTIONS D'ENTRETIEN DES LENTILLES

1 Quelle(s) solution(s) d'entretien recommander pour un porteur de Lentilles Rigides Perméables ?

- En 1^{ère} intention : utilisation quotidienne de la solution multifonctions MENICARE PURE + utilisation hebdomadaire de PROGENT pour une déprotéinisation et un nettoyage intensif garantissant une parfaite qualité de surface des lentilles + en cas de larmes grasses : SPRAY & CLEAN pour une activité nettoyante renforcée.
- En 2^{ème} intention : utilisation quotidienne du système oxydant à disque de platine PLATINCARE + utilisation hebdomadaire de PROGENT pour une déprotéinisation et un nettoyage intensif garantissant une parfaite qualité de surface des lentilles.



2 Quelle(s) solution(s) d'entretien recommandez-vous pour un porteur de Lentilles à renouvellement fréquent ?

- En 1^{ère} intention : utilisation quotidienne de la solution multifonctions MENICARE SOFT ou SOLOCARE AQUA.
- En cas de contexte à risque ou de terrain allergique, préférez l'utilisation du système oxydant à disque de platine PLATINCARE.



(Lire les notices d'utilisation des produits.)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook / LinkedIn / Instagram **NOUVEAU !!**




Formez-vous sur place ou à distance !

Tous nos e-learning disponibles sur campusmenicon.fr

Consultez et réservez des nouvelles dates pour le deuxième semestre 2021 !

- E-learning - vidéo en ligne, accès libre 24/7
- Formation à distance - vidéo conférence d'une heure à l'heure de déjeuner.
- Formation sur place - pour allier théorie et pratique, l'accueil à notre siège se fera dans le respect des consignes sanitaires de circonstance.

NOUVEAU SITE e-menicon.fr à découvrir au fil de l'été

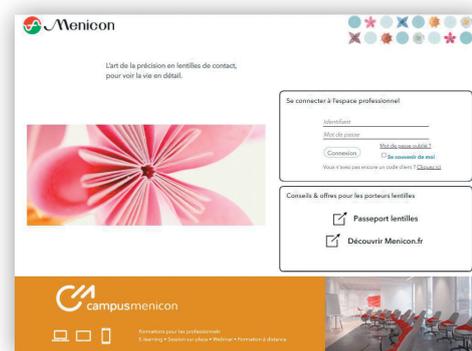

NOS COORDONÉES

Services Clients : Tél. : 01 85 73 13 11 / Fax : 01 85 73 13 97 serviceclients@menicon.fr

Assistance Technique : Tél. : 01 85 73 13 12 atechnique@menicon.fr

Formation Menicon : campus@menicon.fr

Menicon SAS

Paris Nord 2 - 13 rue de la perdrix
CS 20061 Villepinte - 95926 Roissy Charles-de-Gaulle cedex